



ใบสั่งจ่าย

ผู้รับจ้าง บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๙/๑๙๙ ซอยนวมินทร์ ๑๖๓
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๓๐-๗๓๙๑-๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๗๐๖๒๘๙๗
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๗๗๑๐๘๒๗๒๖
ชื่อบัญชี บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด
ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖

ใบสั่งจ่ายเลขที่ สข. ๓๗ / ๒๕๖๘
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลตำรวจ
ที่อยู่ -๔๙๒/๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ -๐๒๒๐๗๖๐๖๓

ตามที่ บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด ได้เสนอราคา ไร่ต่อ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) (ตามขอบเขตของงานที่แนบและเอกสารใบเสนอราคาเลขที่ ASRAS/๒๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	๑	งาน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๔๔๘,๕๙๘.๑๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๑,๔๐๑.๘๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

การสั่งจ่าย อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน
- ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- สถานที่ส่งมอบ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๓
- ระยะเวลารับประกัน -ปี

๕. สวงนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น

จากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ

ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา

เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๔๗๓๒๔๖๘ จ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก

(Shock Wave) ของ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา ชั้น ๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ทศพร ทศพร..... ผู้สั่งจ้าง

(พลตำรวจโททวิศิลป์ เวชวิธาน)

นายแพทย์ใหญ่ (สบ๘)

วันที่ ๐๕ ๒๕๖๗ ๐๕ ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... ทศพร..... ผู้รับใบสั่งจ้าง

(ทศพร ทศพร)

วันที่ ๑/๒/๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๔๗๓๒๔๖๘

เลขคুমสัญญา ๖๗๑๑๑๔๐๒๔๗๓๘

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave)

๑. ความเป็นมา

หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. ได้ให้บริการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย อันเป็นที่มาของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพศชาย (Men Health Clinic) ห้องตรวจโรคศัลยกรรม และมีแนวคิดที่จะเพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษา โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำ (Extracorporeal Shock Wave Therapy)

๒. วัตถุประสงค์

จัดหาเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) เพื่อใช้ในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-Gp) ของกรมบัญชีกลาง


๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

เป็นเครื่องสำหรับรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายด้วยคลื่นกระแทกจากภายนอกร่างกาย (Extra-corporeal Shock Wave Therapy : ESWT) โดยการกำเนิดคลื่นช็อคเวฟเป็นคลื่นชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Shock Wave Source) รวมทั้งสามารถใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและ กระดูกได้

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นเครื่องสำหรับรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายด้วยคลื่นกระแทกจากภายนอกร่างกาย (Extra-corporeal Shock Wave Therapy for Erectile dysfunction : ESWT for ED) โดยการ ส่งผ่านคลื่นช็อค เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ (Angiogenesis) ในอวัยวะเพศชาย

บริษัท อี.พี.อี. จำกัด

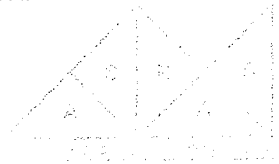

ที่.....

.....

.....

.....

๒. เครื่องมีการกำเนิดคลื่นช็อคเวฟเป็นชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Shock Wave Emitter) และหัวยิงมีรูปแบบการปล่อยคลื่นช็อคแบบ Smart focus สามารถส่งผ่านคลื่นช็อคได้หลายช่วงความถี่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวยิง และมีปุ่มสำหรับเริ่ม/หยุดการยิง หรือ เพิ่ม/ลด ระดับพลังงานหรือความถี่ที่หัวยิง
๓. สามารถใช้รักษาโรคในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดหัวยิง
๔. ตัวเครื่องออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก กะทัดรัด มีหน้าจอสีแสดงภาพและควบคุมการทำงานแบบสัมผัส
๕. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ามาตรฐานขนาด ๒๐๐-๒๔๐ VAC/๕๐ Hz
๖. เครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๑. การให้กำเนิดคลื่นช็อคของหัวยิงเป็นแบบ Electromagnetic Shock Wave Emitter : EMSE
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องปล่อยคลื่นช็อคไม่น้อยกว่า ๔๐ mm.
๓. ให้ระดับความถี่ในการรักษาไม่น้อยกว่า ๖๐ mm.
๔. มีความหนาแน่นของพลังงานคลื่นช็อค (Energy flux density : ED) ที่ ๐.๐๑๐ - ๐.๓๐๖ mJ/mm^๒
๕. ให้พลังงานของคลื่นช็อค ณ ตำแหน่งโฟกัสที่ (Effective energy : ๑๒ mm.) ที่ ๐.๒๘ - ๒๑.๖ mj
๖. ให้ความถี่ในการปล่อยคลื่นช็อคที่ ๐.๕ - ๒๐ Hz
๗. มีระดับพลังงานสูงสุด ๒๐ ระดับ
๘. มีรูปแบบการปล่อยคลื่นช็อคได้ทั้งในแบบคงที่และแปรผัน
๙. เครื่องใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๑° C และมีระบบระบายความร้อนภายในตัวเครื่อง
๑๐. เครื่องมีหน้าจอสีแบบสัมผัสสำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผล
๑๑. เครื่องมีโปรแกรมรองรับการตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ บันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย บันทึกรูปแบบการรักษาโรคต่างๆ แผนภูมิแสดงค่าการใช้คลื่นช็อคในการรักษา เป็นต้น
๑๒. ตัวเครื่องมีการแจ้งเตือนหรือบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ป่วย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เงินบำรุง รพ.ตร. ประจำปี ๒๕๖๘ วงเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

เบิกจ่ายงวดเดียว

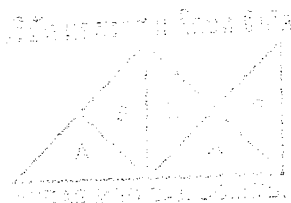

ทำโดย

(Signature)


๒๕๖๗


๒๕๖๘


๙. อัตราค่าปรับ


กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง


๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)


พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ
(อัสพล ตันตะรวงศา)

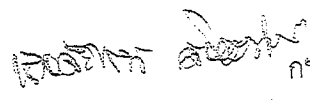
พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ
(เสาวลักษณ์ สัจจวงษ์)

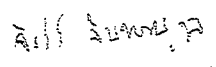พ.ต.ต.  กรรมการ
(จิริวีร์ จันทรานุกุล)

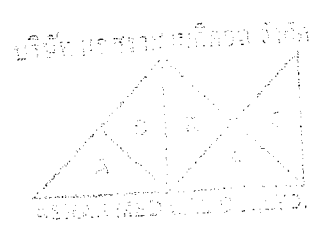

 _____

 _____

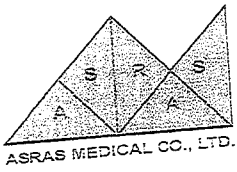

วันที่ 5 กันยายน 2567

ที่ ASRAS/208/2567

เรื่อง ขอเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave)

เรียน นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ
 492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) เพื่อให้ท่านได้โปรดพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน ราย	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม บาท
1	จ้างเหมาบริการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568 <u>หมายเหตุ</u> คิดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย โดยผู้ป่วย 1 ราย บริการ 6 ครั้ง ในอัตรารายละ 12,000 บาท จำนวนผู้ป่วยประมาณ 40 ราย <u>เงื่อนไข</u> 1. ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว 2. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย 3. ยื่นราคา 1 ปี 4. ชำระเงิน ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	40	12,000.00	480,000.00
ผู้เสนอราคา : นายโชติวีรธร หนาน เบอร์โทร. : 081-594-7998 e mail : sale.asras@gmail.com		รวมมูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		448,598.13 31,401.87 480,000.00
สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด

(นางพรทิพย์ จำปาถิ่น)
 กรรมการผู้จัดการ

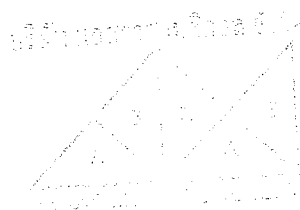

กิตติกร

(Handwritten signature)

คุณลักษณะเฉพาะ

เช่าเครื่องให้การรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยคลื่นกระแทก (Extra-corporeal Shock Wave Therapy(ESWT) for Erectile dysfunction)

1. ความต้องการ


เป็นเครื่องสำหรับรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายด้วยคลื่นกระแทกจากภายนอกร่างกาย (Extra-corporeal Shock Wave Therapy : ESWT) โดยการกำเนิดคลื่นช็อกเวฟเป็นชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Shock Wave Source) รวมทั้งสามารถใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกได้

2. คุณสมบัติทั่วไป


- 2.1 เป็นเครื่องสำหรับรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายด้วยคลื่นกระแทกจากภายนอกร่างกาย (Extra-corporeal Shock Wave Therapy for Erectile dysfunction:ESWT for ED) โดยการส่งผ่านคลื่นช็อกเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ (Angiogenesis) ในอวัยวะเพศชาย
- 2.2 เครื่องมีการกำเนิดคลื่นช็อกเวฟเป็นชนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Shock Wave Emitter) และหัวยิงมีรูปแบบการปล่อยคลื่นช็อกแบบ Smart focus สามารถส่งผ่านคลื่นช็อกได้หลายช่วงความลึกโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวยิง และมีปุ่มสำหรับเริ่ม/หยุดการยิง หรือ เพิ่ม/ลด ระดับพลังงานหรือความถี่ที่หัวยิง
- 2.3 สามารถใช้รักษาโรคในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อต่างๆได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดหัวยิง
- 2.4 ตัวเครื่องออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก กระทัดรัด มีหน้าจอสีแสดงภาพและควบคุม การทำงานแบบสัมผัส
- 2.5 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ามาตรฐานขนาด 200-240 VAC/50 Hz
- 2.6 เครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 การให้กำเนิดคลื่นช็อกของหัวยิงเป็นแบบ Electromagnetic Shock Wave Emitter: EMSE
- 3.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องปล่อยคลื่นช็อกไม่น้อยกว่า 40 mm.
- 3.3 ให้ระดับความลึกในการรักษาไม่น้อยกว่า 60 mm.
- 3.4 มีความหนาแน่นของพลังงานคลื่นช็อก (Energy flux density:ED) ที่ 0.010 – 0.306 mJ/mm.²
- 3.5 ให้พลังงานของคลื่นช็อก ณ ตำแหน่งไฟกัสที่ (Effective energy: 12 mm.) ที่ 0.28 – 21.6 mj
- 3.6 ให้ความถี่ในการปล่อยคลื่นช็อกที่ 0.5 – 20 Hz
- 3.7 มีระดับพลังงานสูงสุด 20 ระดับ
- 3.8 มีรูปแบบการปล่อยคลื่นช็อกได้ทั้งในแบบคงที่และแปรผัน
- 3.9 เครื่องใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 41° C และมีระบบระบายความร้อนภายในตัวเครื่อง

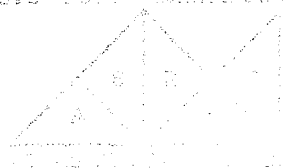

- 3.10 เครื่องมีหน้าจอดีแบบสัมผัสสำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผล
- 3.11 เครื่องมีโปรแกรมรองรับการตั้งค่าต่างได้แก่ บันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย บันทึกรูปแบบการรักษาของโรคต่างๆ แผนภูมิแสดงค่าการใช้คลื่นช็อกในการรักษา เป็นต้น
- 3.12 ตัวเครื่องมีการแจ้งเตือนหรือบันทึกข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ป่วย
- 4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
 - 4.1 สายไฟเครื่อง จำนวน 1 เส้น
- 5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี
 - 5.2 มีวิศวกรผ่านการอบรมจากผู้ผลิต
 - 5.3 กำหนดส่งของตามวันเวลาที่ได้ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

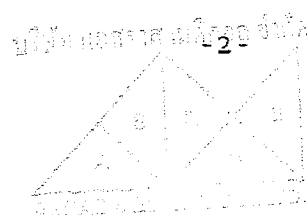

ที่ลงนาม

[Handwritten signature]

AS ARIES ED WE'RE MAKING WAVES



กัตกร

OK

ARIES ED



WE'RE MAKING WAVES

Erectile Dysfunction (ED) is associated with the same risk factors as vascular disease and includes hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidemia, smoking and obesity. It affects over 150 million men across the globe yet, despite its prevalence, only about 15% of those men seek treatment.

One simple result:

Physicians and patients know that most ED treatment options available in the market today are either painful, invasive, or only offer temporary relief to a medical situation that can negatively impact men's confidence and lifestyle.

ARIES ED is an energy-wave treatment designed to correct erectile dysfunction by activating angiogenesis in the penile and pelvic tissue - resulting in the increased blood flow necessary to produce an erection.

Given its Smart Focus™ energy transmitting technology, ARIES ED offers a painless solution to ED that can be conducted quickly and in the privacy of a physician's office. This patented technology, not offered by others in the market today, is what makes ARIES ED so effective and exciting for patients and physicians seeking long-term results.

ARIES ED offers the growing community of patients and physicians treating ED a new and effective long-term solution that works.

ARIES ED - Innovation for Your Patients

After years of ED solutions that are either invasive, painful or only provide temporary relief, patients now have access to a treatment option that addresses the real problem. ARIES ED is:

- Painless - No more painful injections or possible infections from invasive procedures.
- Private - Sessions are conducted quickly in your office.
- Effective - Results exceed almost all other options on the market today.

Best of all, it produces long-term results. No more temporary fixes and side-effects from pills and other medications that needs to be metabolized.


ARIES ED - Innovation for Your Practice

As a physician, successfully treating your patients is your main concern. As a result, it is also important for your medical practice to expand and provide patients with the latest treatment options.

ARIES ED enables you to:


- Provide New Solutions - Show your commitment to existing ED patients by investing in the latest treatment option.
- Attract New Patients - Stand out in your community by offering a new and painless solution.
- Increase Physician Referrals - Leverage ARIES ED's effectiveness to solve the tough ED cases within your community.

Best of all, ARIES ED allows you to possibly create new revenue streams for your medical practice - which will only help you serve more patients in your community.

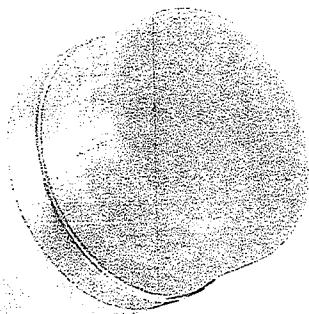

"ARIES ED is highly effective. It is convenient, easy to use, and comfortable for our patients."


- Dr. Peter Lyndorf

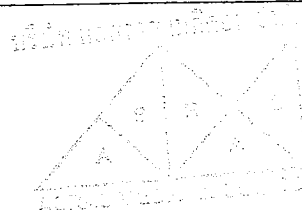


Handwritten signature

Handwritten signature

ARIES ED – Smart Focus™ Waves at Work

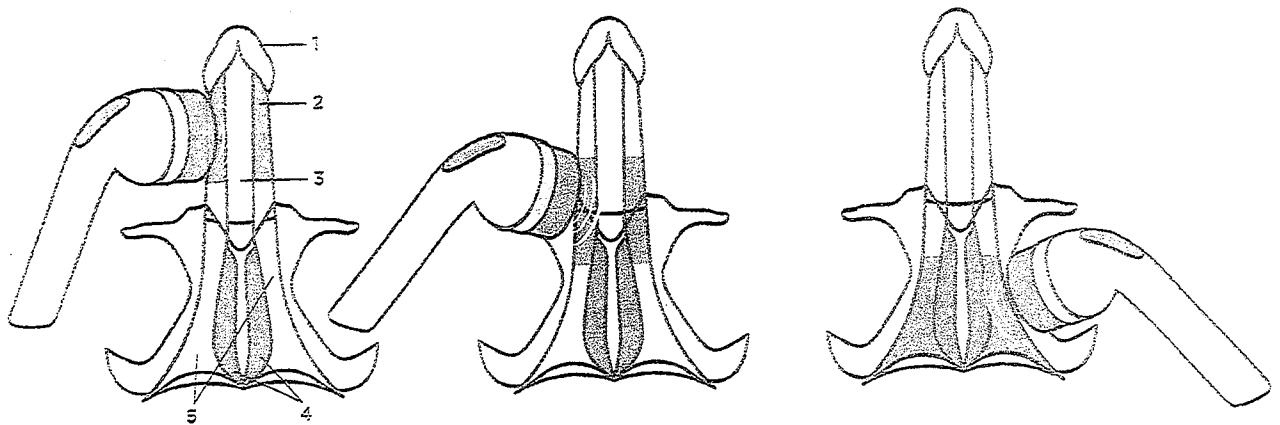

1 Glans penis 2 Corpus cavernosum 3 Corpus spongiosum 4 Bulbospongiosus muscle 5 Ischiocavernosus muscle

 Treatment Area

ARIES ED is a non-invasive and painless treatment that can be conducted in the privacy of your office. Here's how it works:

- While the patient is lying down, an ultrasound gel is applied to the penile and pelvic tissue.
- The Smart Focus™ technology skillfully creates a combination of waves that treats a broad area of the region – everything from the superficial surface (such as the penile shaft) to the deeper muscular areas in the pelvis.
- Repeat the treatment. It is recommended that this same treatment be conducted 5 – 6 times, once or twice a week, in order to get the best results.
- The waves work internally and do not cause any pain or external scarring. Patients can assume regular activity after the procedure and treatment is so quick that most have no problem participating in multiple sessions to help correct ED.
- Patients report improvement a few weeks after they begin treatment.

Studies have shown that ARIES ED provides a more long-term solution for 70% of patients – compared to the popular injections (at 25%) and erectile dysfunction pills (50/60%) that only offer temporary relief.*

After 5 – 6 independent 15 to 20 minutes sessions, ARIES ED significantly stimulates growth factors in the penile and pelvic tissue and improves endothelial function by angiogenesis and neovascularization.


This growth can be seen (and shared with the patient) on ultrasound images of the penile and pelvic tissue over the course of the treatment.




Penile tissue after vascular dysfunction



Secretion of angiogenic factors

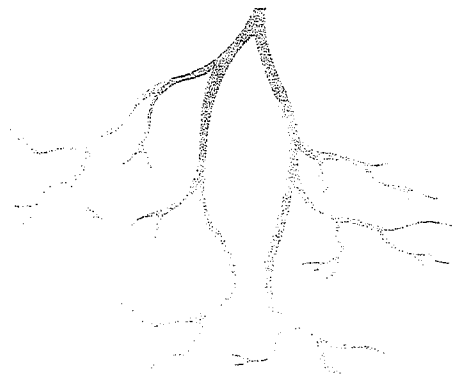

Enhanced angiogenesis in penile tissue

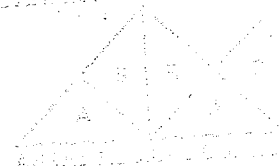

CASE STUDY:

Clinic for Sexual Dysfunction Experiences the ARIES ED Wave

SITUATION:

In order to test the new ARIES ED device, the clinic for sexual dysfunction, Gentofte in Denmark conducted a study in men above 40 years of age showing symptoms of urological problems, including erectile dysfunction, which ranged from mild to moderate cases. The clinic was looking for an effective, safe and non-invasive method to treat these patients to improve their quality of life.


SOLUTION:

Patients underwent 6 sessions with the ARIES ED device – each lasting 15 to 20 minutes. The applicator, emitting ARIES ED's unique Smart Focus™ wave technology, was applied to the penile tissue and pelvic tissue each time. Patients did not receive any other treatments during this time nor were they taking other supplements or medications.

RESULT:

Frequency and quality of spontaneous erections were increased by 75%. ED Patients were also pleased with the treatment option – grading it as comfortable and pain-free. Given its effectiveness, Dr. Lyngdorf continues to offer ARIES ED to his ED patients today.


Did you know, 70% of patients want their physicians to address the issue of erectile dysfunction first.

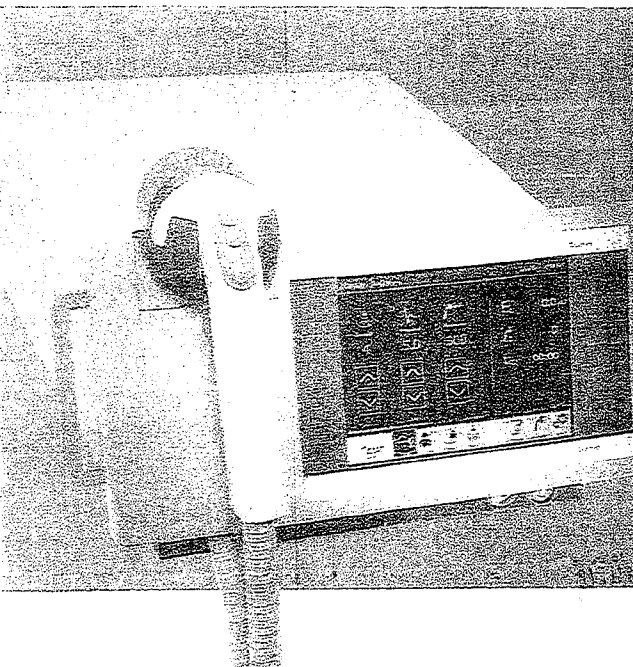


Try ARIES ED Today!

Even the ARIES ED is right for your medical practice, contact your local Donner MedTech representative.

Donner

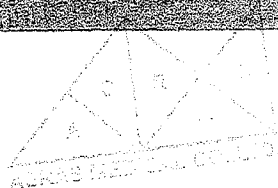

ARIES ED BRINGING A WAVE OF INNOVATION

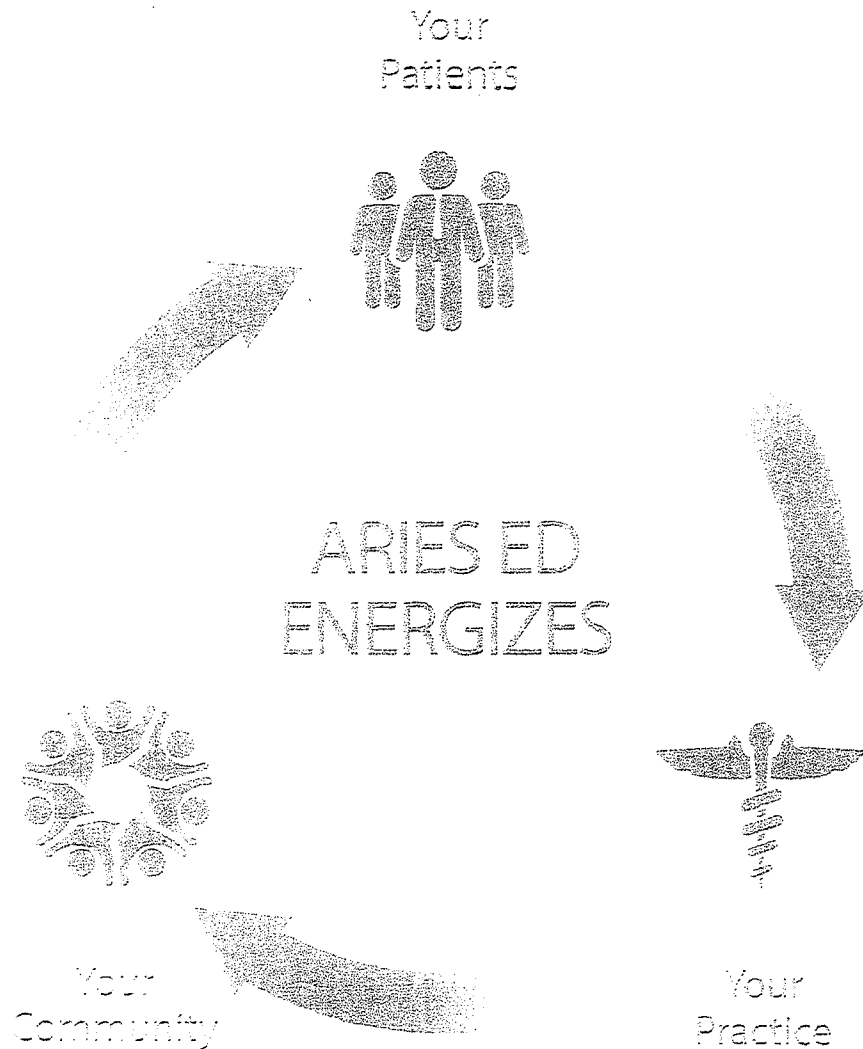

Medical professionals and opinion leaders worldwide, treating patients with ED, have joined the ARIES ED Wave. They have been so pleased with the results, they are actively supporting research, marketing, and usage of this new treatment around the globe.

EASY | EFFECTIVE | EXCITING

ARIES

DE
T

DESCRIPTION

Handpiece
Cable
Control
Switch

PRICE

Handpiece \$150.00
Cable \$100.00
Control \$100.00
Switch \$100.00
Total \$450.00

ITEM NO.

Handpiece 1000
Cable 1000
Control 1000
Switch 1000

DATE

10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

NAME

John Doe
John Doe
John Doe
John Doe

ADDRESS

123 Main St
123 Main St
123 Main St
123 Main St

CITY

New York
New York
New York
New York

STATE


NY
NY
NY
NY

ZIP

10001
10001
10001
10001

Approximate price of handpiece with controls is \$150.00 plus \$100.00 for cable and switch.

EASY TO EFFECTIVE EXACTING

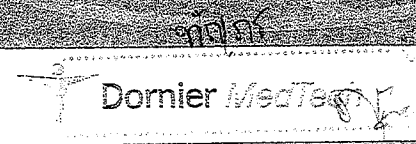

ช่วยการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
往来账户对账单
STATEMENT OF CURRENT DEPOSIT

ธนาคารกสิกรไทย
开利银行 KASIKORNBANK



ชื่อ บจก. แอสราส เมคคิล
ที่อยู่ 129/199 ซ.นวมินทร์ 163 แขวง นวลจันทร์
เขต ปทุม กทม. 10230

สาขาเจ้าของบัญชี 0077
สาขานนวมินทร์ 36
เลขที่บัญชีเงินฝาก 077-1-08272-6

*** รบกวนแจ้งนักการโอนชำระมาที่ Email : daungjai_pom2520@hotmail.com

ติดต่อกลับ คุณดวงใจ

(แผนกการเงิน)

02-930-7391 ต่อ 120

ขอบคุณค่ะ

บริษัท แอสราส เมคคิล จำกัด



ทักท้วง

OF